

Luna 8

mobiles Lesegerät




Luna 8

Die Luna 8 ist ein mobiles Lesegerät, welches Sie flexibel einsetzen können. Der 8-Zoll-Bildschirm bietet ein Full-HD-Bild und dank der 13 Megapixel Kamera erhalten Sie ein scharfes Bild. Wenn der Ständer ausgeklappt wird fokussiert die Kamera automatisch auf Dokumente. Durch das Einklappen des Ständers schaltet es automatisch in die Fernsicht. Mit der 2,5- bis 19-fachen Vergrößerung und den 10 kontrastreichen Modi lassen sich Texte deutlich lesen.

Über Mikro-HDMI ist es möglich, das Bild auf einem externen Bildschirm anzuzeigen. Das Aufladen kann mit einem USB-C Kabel oder mit dem mitgelieferten Ladegerät erfolgen. Durch den leistungsstarken Akku kann das Gerät bis zu 8 Stunden kontinuierlich verwendet werden, dies ist ideal für die Arbeits- oder Schulbedingungen.

Wichtigste technische Daten

- 8 Zoll IPS Bildschirm
- 13 Megapixel Autofokus-Kamera
- Full-HD Bildschirm- und Kameraauflösung
- 2,5 - 19-fache Vergrößerung
- Nah- und Fernansicht
- Foto- und 10 kontrastreiche Modi
- schwenken in eingefrorenen, gespeicherten Bildern
- Lesezeilen- und Maskenfunktionen
- einfaches Design mit taktile Tasten
- ausklappbarer Ständer
- bis zu 8 Stunden kontinuierlicher Dauerbetrieb
- Aufladen über USB-C-Kabel oder mitgeliefertes Ladegerät möglich.
- Mikro HDMI-Ausgang
- 218x143x11mm
- 500 Gramm inkl. Akku

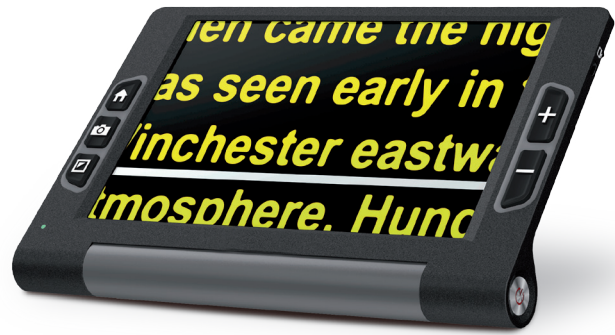

Rehan Medizingeräte Handels GmbH

Im Teelbruch 104

45219 Essen-Kettwig

Tel.: +49 (0) 2054 12457 99

Fax: +49 (0) 2054 12457 98

info@rehan.de

www.rehan.de