

# i-See Speech

elektronisches Bildschirmlesegerät



# i-See Speech

Das i-See Speech komplettiert unser Produktangebot an Bildschirm lupen. Damit bieten wir die Sprachvariante des kürzlich eingeführten i-See Touch. Wir haben die nutzerfreundliche Bedienung des i-See Touch angewandt und zusammen mit der Vorlesefunktion im gesamten Bildschirm verarbeitet.

Dank der Full HD-Kamera und dem selbstentworfenen Full HD-Bildschirm liefert das i-See Speech eine haarscharfe Bildqualität sowohl in den Foto- als auch in den hochwertigen Kontrasteinstellungen. Bei der minimalen Vergrößerung von 2fach liefert das i-See Speech das gewünschte Resultat, wodurch die Darstellung der Gesamtübersicht eines A4 erreicht werden kann. Wird vorrangig Kontrast benötigt, gehen wir noch einen Schritt weiter und stellen eine Vergrößerung von lediglich 1fach zur Verfügung.


Ermüden Sie beim Lesen? Mit einem Knopfdruck schalten Sie von der Lese- zur Sprachfunktion um. Sie verfügen dann über allerlei Funktionen und Komfort, um den Textteil auszuwählen, den Sie vorgelesen haben wollen.

## Wichtige technische Daten - Lesefunktion

- Full HD-Kamera mit 22" Full HD-Bildschirm
- Lesefunktion mit beweglichem A3 XY-Tableau
- Touchbedienung unter dem Bildschirm
- Funktionsmaske für nutzerspezifische Anwendung
- Vergrößerung 1 – 65 fach (vollständige A4-Breite sichtbar)
- 3 Fotomodi und 10 Hochkontrastmodi
- 

## Wichtige technische Daten - Sprachfunktion

- Vorlesen von Texten
- Spracherkennung
- Sprach- und Stimmenauswahl (bis zu 5 Sprachen)
- Bedienung über Full Touch-Bildschirm
- schnurlose Bluetooth-Fernbedienung (optional)
- Dokumentenspeicher
- Zonendetektion (Text-, Abschnitts- und Spaltenerkennung)
- Lautstärke und Lesegeschwindigkeit einstellbar
- Textnavigation

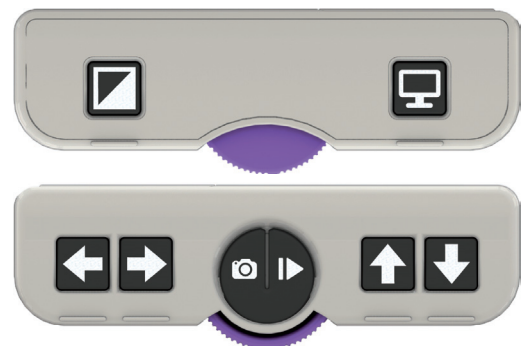

Rehan Medizingeräte Handels GmbH

Im Teelbruch 104

45219 Essen-Kettwig

Tel.: +49 (0) 2054 12457 99

Fax: +49 (0) 2054 12457 98

info@rehan.de

www.rehan.de