

i-See Touch

elektronisches Bildschirmlesegerät



i-See Touch

Mit dem i-See Touch läutet Rehan eine Neuentwicklung für elektronische Bildschirmlupen ein. Die bewährten Funktionen des i-See sind ab sofort mit benutzerfreundlichen Touch-Tasten auf dem von Rehan konzipierten Full HD-Bildschirm zu bedienen.


Die Kombination aus Full HD-Kamera und Full HD-Bildschirm erzeugt selbst bei kleineren Vergrößerungen ein ausgesprochen scharfes und ruhiges Bild. Dadurch kann ein A4-Dokument in seiner vollständigen Breite angezeigt werden. Ist vorrangig Kontrast gefragt, können wir sogar eine Vergrößerung von lediglich 1fach anbieten.

Als alternative Bedienoption im Tableau bieten wir außerdem eine schnurlose Fernbedienung an. Diese lässt sich sehr leicht am Tableau anbringen und ist schlichtweg mit zwei Tasten und einem Drehknopf ausgestattet.

Rehan Electronics setzt zur Herstellung unserer Produkte auf nachhaltige und umweltfreundliche Fertigungsmethoden. Alle Produkte werden in unserem umweltfreundlichen Werk in Irland, gefertigt und geprüft. In unserem Werk mit nur geringem CO₂-Ausstoß legen wir Wert auf natürliche Materialien, die Gesundheit der Mitarbeiter und effizienten Umgang mit Energie.

Wichtigste technische Daten

- Full HD-Kamera mit 22" Full HD-Bildschirm
- Touchpadtechnologie im Display, angedeutet mit Bezugslinien oder mit fühlbarem Bezugsrahmen
- einfach erreichbarer Ein- und Ausschalter
- Monitor stufenlos höhenverstellbar
- Vergrößerung 1 – 65fach
- A4-Seitenbreite bei 1-facher Vergrößerung völlig sichtbar
- Bis 9 cm Lesematerialdicke
- 3 Fotomodi und 10 Hochkontrastmodi
- Funktionsmaske für nutzerspezifische Anwendung
- Lesetisch (Tableau in DIN A3-Breite) mit Bremsfunktion in vertikaler und horizontaler Richtung
- HDMI-Eingang für den Anschluss an den PC

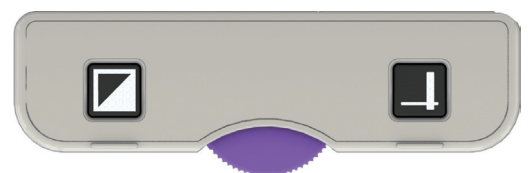

Rehan Medizingeräte Handels GmbH

Im Teelbruch 104

45219 Essen-Kettwig

Tel.: +49 (0) 2054 12457 99

Fax: +49 (0) 2054 12457 98

info@rehan-sehen.de

www.rehan-sehen.de